

AED(自動体外式除細動器)



AEDといえば、ALSOK。

AEDのレンタル、管理、講習まで トータルでサポート



ALSOKはAED販売当初より、AEDの重要性に関する周知と、正しい使い方の啓蒙を行っております。

お客様ニーズに合わせた幅広いラインナップをご用意しており、ALSOKが最適なAEDをご提案します。

選べる3つの導入プラン

レンタル

契約期間5年（ご希望により延長可能）
定期消耗品の他に、実際に使用した
消耗品交換なども含んだプランです。

パッケージ内容

- 1 定期消耗品を交換時期にお届けします。
- 2 使用した際、消耗品を無償でお届けします。
- 3 破損などの際、お客様の負担なしで交換します。
※お客様に責任のある場合は有償となる場合があります。

ご購入

標準セットをお買い上げ頂くプランです。
定期消耗品を含むパッケージも
ご用意しています。

リース

弊社指定、若しくはお客様指定の
リース会社をお選び頂けます。
契約期間5年（最長8年まで延長可能）
定期消耗品を含んだパッケージプランも
ご用意しています。

選べるAED機種ラインナップ

ALSOK AED



	ZOLL AED Plus	ZOLL AED 3	ペネハート C1A	ペネハート C2	レスキューハート HFD-3500	ハートスタート FRx+e	ハートスタート HS1+e ^{※1}
ガイダンス機能 (音声)	○	○	○	○	○	○	○
ガイダンス機能 (ディスプレイ)	△ (文字のみ)	○		○			
未就学児モードへの切替機能		○	○	○		○	
バイリンガル対応	○ ^{※2}	○ ^{※2}	○	○		○ ^{※2}	○ ^{※2}
耳マーク	○	○		○	○	○	○
セルフチェック機能	○	○	○	○	○	○	○
防塵・防水性能	IP55	IP55	IP55	IP55	IP56	IP55	IP21

クラス分類 高度管理医療機器、特定保守管理医療機器

※1: ハートスタートHS1+eの詳細は弊社までお問い合わせください。 ※2: 事前の申し込みで、対応言語を英語へ変更可能です。

確かな実績を誇るALSOKが最適なAEDをご提案します。

AEDの主な機能



ガイダンス機能 (音声)

不慣れな人でも操作ができるよう、音声で使用者をサポートします。




ガイダンス機能 (ディスプレイ)

音声に加え、ディスプレイで操作手順やパッドの位置などをサポートします。



未就学児モードへの切替機能

ボタン操作やキーを指すことで未就学児と小学生～大人のモードを切り替え。機種によってはパッドもそのまま使用できます。

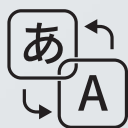

バイリンガル対応

いつでも誰でも利用できるように「日本語⇄英語」の切り替えが可能です。また、事前の申し込みで、対応言語を英語へ変更可能な機種もあります。



耳マーク

一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会より「耳マーク」の使用許諾を得ているAEDです。



セルフチェック機能

緊急時に使用できる状態を保つため、AEDが自動的に機能をテスト。結果をインジケータに表示します。

※画像は「ZOLL AED 3」の正常時です。



防塵・防水性能

屋外など機械に悪環境な状態でも使用ができるよう、防塵・防水性能を有しています。IPコードでは前の数字が防塵等級、後ろの数字が防水等級を表します。

「胸骨圧迫ヘルプ機能」搭載、
適切な救命処置をサポート

ZOLL AED Plus

胸骨圧迫の質にリアルタイムで反応する「胸骨圧迫ヘルプ機能」を搭載し、初めての救助でも適切な圧迫をサポートします。心肺蘇生の質を高め、救命率の向上を支える、現場を意識した設計のAEDとなっています。



小学生～大人用除細動パッド

強く・速く・絶え間なくをサポート 「胸骨圧迫ヘルプ機能」


胸骨圧迫の深さを計測し、リアルタイムで救助者へフィードバック。音声ガイダンスとディスプレイ表示で、より質の高い胸骨圧迫へガイドする機能です。

音声ガイダンス

もっと強く
押してください！



ディスプレイ表示

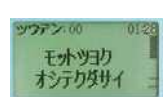

5年間消耗品買い替え不要 (WSモデル※の場合)

バッテリーとパッドは5年間の長寿命を実現。本体の保証期間中は、消耗品交換が不要なため、管理者様の負担を軽減すると同時に、いざという時の即応性を高めます。

※セルフテスト周期が週1回の場合

絵文字インジケータ



絵文字表記があるため耳の不自由な方でも、一次救命処置の流れを確認できます。



耳が不自由な方にも
ご使用いただけます

医療機器承認番号

22200BZ100015000

寸法

高さ133×幅241×奥行き292mm


重量

3.1kg(全て含む)

「胸骨圧迫ヘルプ機能」搭載、
迅速な未就学児対応を実現

ZOLL AED 3


小学生～大人・未就学児の切替が可能なパッドと、わかりやすいガイダンスにより、初めての方でも的確な処置が可能。設置者や管理者の利便性にも配慮した、救助者・傷病者の双方を支えるAEDとなっています。

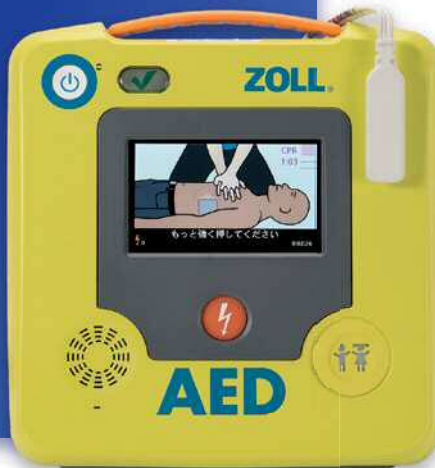

CPR Uni-padz III 除細動パッド

強く・速く・絶え間なくをサポート 「胸骨圧迫ヘルプ機能」

適切な救命処置に欠かせない良質な胸骨圧迫。「胸骨圧迫ヘルプ機能」は、胸骨圧迫の深さを除細動パッドの「加速度センサー」で計測し、リアルタイムに救助者へフィードバック。ガイドライン推奨の質の高い胸骨圧迫へガイドします。

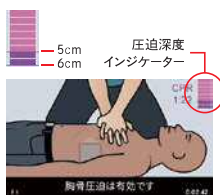

ボタンひとつで 未就学児モードへ切替

ボタンを押すだけで未就学児モードへ切替可能。未就学児専用の解析アルゴリズムを適用し、最適化した電気ショックを必要に応じて行えます。

5年間消耗品 買い替え不要

バッテリーとパッドは5年間の長寿命を実現。本体の保証期間中は、消耗品交換が不要なため、管理者様の負担を軽減すると同時に、いざという時の即応性を高めます。



耳が不自由な方にも
ご使用いただけます

医療機器承認番号

30100BZ100003000

寸法

高さ127×幅236×奥行き247mm

重量

2.5kg(バッテリー含む)

未就学児モードへの切替可能

迅速な電気ショックが可能なAED

ベネハート C1A

約5秒※でショック指示を行う高速解析機能を搭載し、緊急時の除細動を迅速にサポート。モード切替やバイリンガル音声、圧迫・呼吸のガイドなど、多様な現場ニーズに応えるAEDとなっています。

※20℃環境および小学生～大人モードの初回ショックの場合



キャリング
ケース
装着時



パッド

迅速な除細動

新技術QShockテクノロジーを搭載。初回ショックまでの時間短縮を実現。これにより、除細動の成功確率を高めることができます。

音声言語切り替え



いつでも音声を「日本語⇄英語」に切り替え可能。ボタンを押すと英語のみの音声になります。

※日本語と英語で交互ではありません。

未就学児専用パッド不要



モード切替スイッチ搭載で未就学児モードと小学生～大人モードの切り替えが可能です。パッドを共通で使用できます。



耳が不自由な方にも
ご使用いただけます

医療機器承認番号

30500BZX00237000

寸 法

高さ286×幅219×奥行き78mm

重 量

2.0kg (バッテリー含む)

未就学児モードへの切替可能

大型カラー液晶を搭載した
迅速な電気ショックが可能なAED

ベネハート C2

ベネハートC1Aの機能に加え、7インチのカラー液晶を搭載。音声と画面表示の両面で救助者をナビゲートします。初めて使用する方にも視覚的にわかりやすいAEDとなっています。



キャリング
ケース
装着時



パッド

暗い場所でも分かりやすい 液晶表示



暗い場所でもTFTカラー液晶表示で救命手順が確認できます。

イラストと音声で 分かりやすく手順を表示



パッド装着→心電図解析→電気ショック実行→胸骨圧迫開始の手順をイラストと音声で分かりやすく確認できます。

基本機能は ベネハートC1Aと同様



「初回ショックまでの時間短縮」「言語切り替え」「未就学児モード切替」「環境試験性能」などの機能は共通して搭載。



耳が不自由な方にも
ご使用いただけます

医療機器承認番号

30500BZX00237000

寸 法

高さ286×幅219×奥行き78mm

重 量

2.3kg (バッテリー含む)

未就学児モードへの切替可能

軽くて頑丈。天候、環境を選ばないAED

レスキューハート HFD-3500

携帯性に優れたコンパクト設計で、防塵・防水性能も高く、屋内外問わず使用可能。音声と光による明確なガイド表示により、緊急時でも直感的な操作ができるよう配慮されたAEDとなっています。



キャリング
ケース
装着時



パッドバック

高い防塵・防水性能

過酷な救命環境でも除細動をおこなうため、防塵耐水性能はIP56。さらにMIL規格(※)の耐衝撃・振動性に準拠しています。

※米国軍用規格のための温度、湿度、高度、振動、衝撃、耐水などの過酷な環境条件に即した規格です。

軽量で携帯性に優れる

本体重量は1.1kg。軽量コンパクトで携行しやすいため、簡単に持ち運びが可能。また、コンパクトなので、様々な収納BOXへ収納しやすい設計になっています。

ケースを開けずに使用可能



キャリングケースを開けずに使用できるため、救命時間を短縮できます。

緑色のつまみを引くとパッドが出て来ます。



耳が不自由な方にも
ご使用いただけます

医療機器承認番号

22700BZI00047000

寸法

縦200×幅180×高さ50mm

重量

約1.1kg(除細動パッドバックを含む)

導入実績多数のAED

ハートスタート FRx+e

軽量かつ堅牢で屋外使用にも対応。耐水性に優れ、オプションの小児用キーにより未就学児にも対応可能です。救命現場で求められる多様な状況を想定して設計されたAEDとなっています。



小児用キー (オプション)

CPRコーチング機能

CPR(心肺蘇生)を実施する際の、胸骨圧迫の方法とタイミングについて、音声ガイダンスが詳細にコーチング。

オプションの小児用キーを本体へ差し込むことで、CPRコーチング機能も自動的に未就学児用に切り替わります。

使いやすさと優れた堅牢性

過酷な救命環境でも除細動をおこなうため、IP55の防塵耐水性とMIL規格(※)の耐衝撃・振動性に準拠しています。

※米国防衛装備品のための温度、湿度、高度、振動、衝撃、耐水などの過酷な環境条件に即した規格です。

オプション

未就学児モードに簡単切り替え

キーを本体に差し込むことで小学生～大人用モードから未就学児モードに切り替わります。ショック時のエネルギーを低減(50J)し、パッド配置アイコンの表示や、音声ガイダンスも自動的に未就学児用に切り替わります。



耳が不自由な方にも
ご使用いただけます

医療機器承認番号

22000BZX00305000

寸法

高さ60×幅220×奥行き180mm

重量

約1.6kg(バッテリーおよびパッド・ケース装着時)

未就学児モードへの切替可能

※ハートスタート HS1+eの詳細は弊社までお問い合わせください。

OPTION オプション品

AED収納ボックス



頑強な壁面取り付けタイプで、扉解放時にはブザーが鳴動します。

型 式	UB-932-WS
寸 法	W400×D190×H450mm
重 量	約8.0kg
その他	アルカリ単4電池2本(1年に1回交換) 別途設置工事費

壁掛け用AEDラック



AEDの視認性が良く、取り出し効率に優れたAEDラックです。

型 式	LK-K932-WS
寸 法	W352.4×D175.4×H376.2mm
重 量	約4.0kg
その他	別途設置工事費

樹脂製AED収納ボックス



軽量タイプの樹脂製AED収納ボックス。視認性が良く、インジケータの確認が容易です。扉解放時にブザーが鳴動します。

型 式	UB-932-JB
寸 法	W500×D180×H400mm
重 量	約3.6kg
その他	アルカリ単4電池2本(1年に1回交換) 別途設置工事費

AED自立ボックス

AED収納BOX+自立スタンド。自立型のためアンカー不要です。スタンド内には毛布、付属品等の備品を収納できます。

傾き調整用アジャスター付

アンカー固定も可能

型 式	UB-932-SS
寸 法	W470×D400×H1,400mm
重 量	約24.0kg
その他	アルカリ単4電池2本(1年に1回交換) 別途設置工事費



簡易型自立スタンド

自立型のためアンカー不要で、設置場所の変更が容易です。

傾き調整用アジャスター付

アンカー固定も可能

型 式	UB-S931-JW
寸 法	W436×D359×H1,300mm
重 量	約23kg
その他	LK-K932-WS及びUB-932-JB対応 別途設置工事費



救急トレーニングサービス

救急トレーニングサービスを体験してみませんか？

AEDを最大限有効活用するためには、CPR(心肺蘇生法)を併せて実施することが重要です。ALSOKでは効果的で正しいCPRの講習をご提供いたします。ALSOKの専門トレーニングコーチが、初心者にも分かりやすく、丁寧に指導します。



AEDといえば、ALSOK。

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケーターや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

AED設置者及び管理者は品質保証及び安全管理の為、以下の内容の確認をお願いいたします。

- 1 AEDの設置の際はAED管理者を設置し、製造販売業者の推奨する保守点検を行い、いつでも使用できる状態に管理してください。
- 2 電極パッド、バッテリー等の消耗品には使用期限があるので、使用期限を明記したAED管理表示ラベルを本体又はソフトケース等の分かり易い位置に貼り、使用期限の確認及び期限内の交換を確実に実施してください。
- 3 電極パッドは再使用禁止であり、使い捨てです。
- 4 AEDの添付文書は必ずお読みください。
- 5 AEDに不測の事態が発生した時及び譲渡時、廃棄時、設置場所が変更となった時には、製造販売業者又は販売業者までご連絡ください。

小児等への適用

未就学児に対する小学生～大人用パッドの使用については、未就学児用パッドを備えたAEDが近くにいるなど、やむを得ない場合に限り使用し、その場合、特に、2枚のパッドが触れ合うことがないよう、注意してください。

●弊社は、ご契約いただきましたお客様の各AEDに関して消耗品交換期限のデータ管理を行うと共に、交換時期にお客様へご案内申し上げます。

お気軽にご相談ください。専門スタッフが、ご説明・お見積にお伺いいたします。ご相談のみのご用命も喜んでお受けいたします。ご連絡お待ち申し上げます！



本 社 〒107-8511 東京都港区元赤坂1-6-6
<https://www.alsok.co.jp>

個人情報の取り扱いについて

お客様からお預かりする個人情報は、法令に基づき厳重に管理し、当社の商品のご案内や業務・サービスの提供にのみ利用いたします。なお、当社の個人情報保護方針はホームページにて公表しております。

お問い合わせ



ALSOK AED
(自動体外式除細動器)
公式サイト



ALSOK



@ALSOKnow



ALSOKofficial



●本パンフレットは2025年7月に制作されたものです。